
フィレムチャックFC - 20 ,40 ,21 **片側ウレタン仕様フィルムチャック**FC - 21U ,41U

フィルム状の薄型テストピースに最適



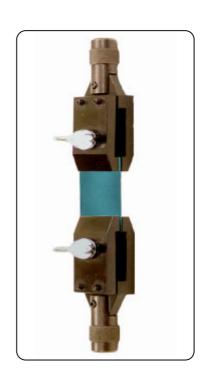

用途]

各種材料の引張強度試験用冶具として当社フォースゲージに取付け、使用できます。 食品包装等、プラスチックフィルム袋のヒートシール強度試験 **食品包装用プラスチックフィルム通則** JISZ1707(1997) ヒートシール軟包装袋及び半剛性容器の試験方法 JISZ0238(1998) ポリエチレンフィルム製袋 JISZ1711(1994) **包装用延伸ポリプロピレンフィルム** JISZ1712(1997)


特徴]

フィルム状の薄いテストピースをはさむのに適しています。 軽量タイプ (FC-21)が加わり、使用目的に合わせより最適なご選択が可能となりました。 FC-21U、FC-41U は、歯の片側がウレタンになっている為、 10~25ミクロンの薄いフィルムでも滑りにくく フィルムに最適な把握力で ヒートシール強度試験での歯切れを大幅に低減します。

仕様]


1-1017					
	FC-21	FC-20	FC-40	FC-21U	FC-41U
特徵	軽量型	標準型	幅広型	片側ウレタン歯	片側ウレタン歯
主な材質	アルミニウム	スチール	スチール	アルミニウム	アルミウム
最大負荷荷重	250N	500N	500 N	250N	250N
取付け部ねじ	M6 P1	M6 P1	M6 P1	M6 P1	M6 P1
重量	約 25g	約 73 g	約 125 g	約 40g	約 70g
開き幅	2mm	2mm	2mm	2mm	2mm
推奨フォースゲージ	PS/FB/PSM	PS/FB/PSM	PS/FB/PSM	PS/FB/PSM	PS/FB/PSM
」は光フィースノーン	DPS/ZP/Z2	DPS/ZP/Z2	DPS/ZP/Z2	DPS/ZP/Z2	DPS/ZP/Z2

付法図 〕

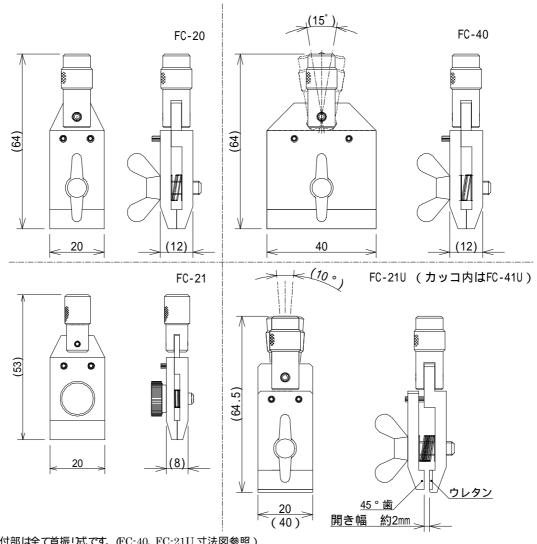

フォースゲージ取付部は全て首振り式です。(FC-40、FC-21U 寸法図参照)

チャック歯形状詳細〕

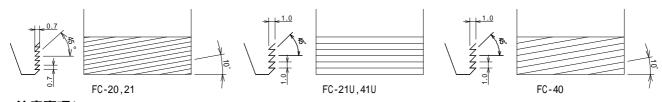

注意事項〕

材料、形状によりチャックできないものもあります。 記載事項は、改良等のため予告なぐ変更することがありますのでご了承々ださい。